

일회용수동랜싯 허가 및 기술문서 작성을 위한 가이드라인

2014. 4.



식품의약품안전처

식품의약품안전평가원 의료기기심사부

개정 이력서

일회용수동랜싯 의료기기 품목별 허가·심사 가이드라인

[illegible]

1. 관련규정

- (1) 「의료기기법」 제6조 (제조업의 허가 등)
- (2) 「의료기기법」 제15조 (수입업의 허가 등)
- (3) 「의료기기법 시행규칙」 제5조 (제조허가 및 제조신고의 절차)
- (4) 「의료기기법 시행규칙」 제7조 (기술문서 등의 심사)
- (5) 「의료기기법 시행규칙」 제18조 (수입허가 신청 등)
- (6) 「의료기기 허가·신고·심사 등에 관한 규정」
- (7) 「의료기기 품목 및 품목별 등급에 관한 규정」
- (8) 「의료기기의 생물학적 안전에 관한 공통기준규격」
- (9) 「의료기기의 안정성시험 기준」

2. 문의처


식품의약품안전처 식품의약품안전평가원 의료기기심사부 구강소화기기과

전화 : (043) 230-0577

FAX : (043) 230-0570

2등급 의료기기 심사 및 허가 절차

- 허가 신청서 제출 ⇒ 관할 지방식약청(의료제품안전과) 검토 ⇒ 허가 통보
- 허가 처리 흐름도

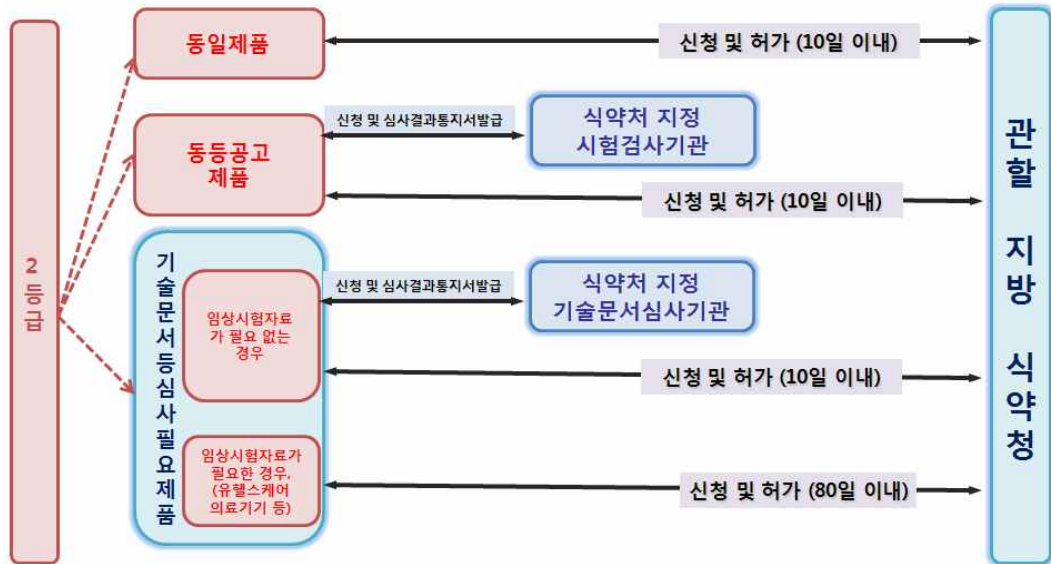

- 품목별(개별제품) 허가

※ 품목별 허가 신청은 신청하고자 하는 제품이 동일제품군에 해당하는 경우에는 하나의 품목허가로 신청하여야 함

☞ 제품(일회용수동랜싯)이 최초 개발되어 사용 목적 및 작용원리가 다를 경우는 임상시험자료를 제출하여 본부에서 심사를 받아야 하며, 동 제품(일회용수동랜싯)이 동일제품군이거나 사용목적 및 작용원리가 동일한 경우에는 임상시험자료 없이 민간심사기관에서 심사

일반적인 작성방법

- ▶ 다음의 허가 및 기술문서 작성방법은 일회용수동랜셋에 대한 기술문서 작성방법을 해설하고자 예시한 것이므로, 특정 회사의 제품과는 관련이 없습니다.
- ▶ 따라서 이를 참고로 하여 허가 및 기술문서 작성 시에는 각 항목의 내용을 귀 회사 제품의 특성을 고려하여 작성해 주시기 바랍니다.
- ▶ 기술문서 심사의뢰서는 「의료기기법」 시행규칙 제7조(기술문서 등의 심사)를 참고하시어, 별지 제7호 서식 또는 의료기기 전자민원창구(<http://emed.mfds.go.kr>)의 의료기기 민원서식작성기 7호 서식을 이용하여 작성하십시오.
- ▶ 의료기기 제조(수입) 허가신청서는 「의료기기법」 시행규칙 제5조(제조허가 및 제조신고의 절차) 및 제18조(수입허가 신청 등)를 참고하시어, 별지 제3호 서식 또는 의료기기 전자민원창구(<http://emed.mfds.go.kr>)의 의료기기 민원서식작성기 3호 서식을 이용하여 작성하십시오.

의료기기 제조(수입) 허가신청서

※ []에는 해당되는 곳에 √ 표시를 합니다. (앞 쪽)

접수번호		접수일자		처리일자		처리기간 1. 임상시험 검토 대상: 80일 2. 기술문서 검토 대상: 65일 3. 기술문서 등 심사 불필요: 10일	
신청인 (대표자)	성명					생년월일	
	주소						
제조(수입) 업소	명칭(상호)					업허가번호	
	소재지						
구분	[] 품목류		[] 제조허가		[] 수입허가		[] 조건부 제조허가
	[] 품목		[] 심사 불필요		[] 기술문서 심사		[] 임상시험 심사

제품명(상품명, 품목명, 모델명)	
분류번호(등급)	
모양 및 구조	
원재료	
제조방법	
사용목적	
사용방법	
사용 시 주의사항	
포장단위	
저장방법 및 사용기한	
시험규격	
제조원(수입 또는 제조공정 전부 위탁의 경우)	
허가조건	
비고	

「의료기기법」 제6조·제7조·제15조 및 같은 법 시행규칙 제5조제1항·제8조제2항·제18조제1항·제21조에 따라 위와 같이 의료기기의 제조(수입) 허가를 신청합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

담당자 성명

담당자 전화번호

식품의약품안전처장
지방식품의약품안전청장 귀하

첨부서류	수수료	
	전자민원	방문·우편민원
1. 제조허가신청의 경우 가. 기술문서와 임상시험에 관한 자료 또는 「의료기기법 시행규칙」 제7조제4항에 따른 기술문서 등의 심사결과통지서로서 발행일부터 2년이 경과되지 아니한 것. 다만 제7조제1항 단서에 해당하는 경우에는 기술문서 등의 심사결과통지서로서 발행일부터 2년이 경과되지 아니한 것에 한함. 나. 제조공정의 전부를 위탁하는 경우 해당 수탁자가 「의료기기법 시행규칙」 별표 2 제3호가목에 따라 제조공정을 전부 위탁받을 수 있는 자에 해당하는지를 증명할 수 있는 서류 2. 수입허가신청의 경우 기술문서와 임상시험에 관한 자료 또는 「의료기기법 시행규칙」 제7조제4항에 따른 기술문서 등의 심사결과통지서로서 발행일부터 2년이 경과되지 아니한 것. 다만 제7조제1항 단서에 해당하는 경우에는 기술문서 등의 심사결과통지서로서 발행일부터 2년이 경과되지 아니한 것에 한하며, 수입하려는 의료기기가 이미 허가받은 의료기기와 동일한 제조원(제조국가·제조회사 및 제조소가 동일한 경우를 말한다)의 동일 제품임을 식품의약품안전처장이 정하는 바에 따라 입증하는 경우에는 이를 생략할 수 있습니다. 3. 조건부 제조허가신청의 경우 기술문서와 임상시험에 관한 자료 또는 「의료기기법 시행규칙」 제7조제4항에 따른 기술문서 등의 심사결과통지서로서 발행일부터 2년이 경과되지 아니한 것. 다만 제7조제1항 단서에 해당하는 의료기기는 기술문서 등의 심사결과통지서로서 발행일부터 2년이 경과되지 아니한 것에 한함. 4. 조건부 수입허가신청의 경우 기술문서와 임상시험에 관한 자료 또는 「의료기기법 시행규칙」 제7조제4항에 따른 기술문서 등의 심사결과통지서로서 발행일부터 2년이 경과되지 아니한 것. 다만 제7조제1항 단서에 해당하는 의료기기는 기술문서 등의 심사결과통지서로서 발행일부터 2년이 경과되지 아니한 것에 한하며, 수입하려는 의료기기가 이미 허가받은 의료기기와 동일한 제조원(제조국가·제조회사 및 제조소가 동일한 경우를 말한다)의 동일 제품임을 식품의약품안전처장이 정하는 바에 따라 입증하는 경우에는 이를 생략할 수 있습니다.	1. 402,000원 2. 195,000원 3. 42,000원	1. 447,000원 2. 217,000원 3. 47,000원

처리절차



신청인

식품의약품안전처 / 지방식품의약품안전청

의료기기 기술문서 등 심사의뢰서

※ []에는 해당되는 곳에 √ 표시를 합니다.

(앞 쪽)

접수번호	접수일자	처리일자	처리기간
			1. 임상시험 자료 심사대상: 70일 2. 기술문서 심사대상: 55일 3. 변경심사대상 가. 임상시험 자료제출 대상: 50일 나. 기술문서에 관한 자료제출 대상: 32일

의뢰인	성명	생년월일
	주소	

제조(수입)	명칭(상호)	업허가번호
업소	소재지	

제조원(수입 또는 제조공정 전부위탁의 경우)	제조업소명	제조국
	소재지	

심사의뢰의 구분 []임상시험 자료 심사 []기술문서 심사
 []변경심사([]임상시험 자료제출 []기술문서 자료제출)

심사의뢰 품목	
제품명(상품명, 품목명, 모델명)	
분류번호(등급)	
모양 및 구조	
원재료	
제조방법	
사용목적	
사용방법	
사용 시 주의사항	
포장단위	
저장방법 및 사용기한	
시험규격	
허가조건	
비고(신청근거)	

「의료기기법 시행규칙」 제7조제2항에 따라 위와 같이 의료기기 기술문서 등의 심사를 의뢰합니다.

이
 호
 지

(서명 또는 인)

의뢰인


담당자 성명

담당자 전화번호

식품의약품안전처장 · 기술문서심사기관장 귀하

첨부서류	수수료	
	전자민원	방문·우편민원
일반 의료기기의 경우에는 다음 각 호의 서류. 다만, 이미 허가를 받은 의료기기와 구조·원리·성능·사용목적 및 사용방법 등이 본질적으로 동등한 의료기기의 경우에는 제5호부터 제7호까지의 자료는 제출하지 아니할 수 있습니다. 1. 이미 허가받은 제품과 비교한 자료 2. 사용목적에 관한 자료 3. 작용원리에 관한 자료 4. 제품의 성능 및 안전을 확인하기 위한 다음 각 목의 자료로서 시험규격 및 그 설정근거와 실측치에 관한 자료. 다만, 국내 또는 국외에 시험규격이 없는 경우에는 기술문서 등의 심사를 받으려는 자가 제품의 성능 및 안전을 확인하기 위하여 설정한 시험규격 및 그 근거와 실측치에 관한 자료 가. 전기·기계적 안전에 관한 자료 나. 생물학적 안전에 관한 자료 다. 방사선에 관한 안전성 자료 라. 전자파 안전에 관한 자료 마. 성능에 관한 자료 바. 물리·화학적 특성에 관한 자료 사. 안정성에 관한 자료 5. 기원 또는 발견 및 개발경위에 관한 자료 6. 임상시험에 관한 자료 7. 외국의 사용현황 등에 관한 자료 체외진단분석기용 시약의 경우에는 다음 각 호의 서류 1. 개발경위, 측정원리·방법 및 국내외 사용현황에 관한 자료 2. 원자재 및 제조방법에 관한 자료 3. 사용목적에 관한 자료 4. 저장방법과 사용기간 또는 유효기간에 관한 자료 5. 성능시험에 관한 자료 6. 시약의 취급자 안전에 관한 자료	1. 360,000원 2. 153,000원 3. 117,000원	1. 400,000원 2. 170,000원 3. 130,000원

처리절차

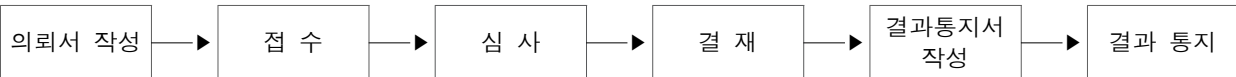

의뢰인

식품의약품안전처 / 기술문서심사기관

의료기기 제조 허가신청서



처리기간
1.임상시험 검토대상 : 80일
2.기술문서 검토대상 : 65일
3.기술문서 등 심사 불필요 : 10일

신청인

[성명(대표자)]	[생년월일]	년 월 일
[주소]	()	

제조 업소

[명칭(상호)]	
[소재지]	()
[사업자등록번호]	[업허가번호]

신청 구분

[품목류/품목]	
[심사의 종류]	
[제품의 구분]	

상세내용

※[제품명]은 제출파일 생성 시 자동입력됩니다.

[제 품 명]	
[상 품 명]	
[업소명 표기 여부]	
[품 목 명]	
[품목분류번호]	
[등 급]	

사용목적

[사용목적]	
[성 능]	

신청항목

[원 재 료]	별첨
[제조방법]	별첨
[사용방법]	별첨
[사용 시 주의사항]	별첨

[저장방법]	별첨
[사용기한]	별첨
[시험규격]	별첨

○ 제조원

[제조의회자]	(,)
[제 조 자]	(,)

※제조자 항목은 제조의회자와 제조자가 동일할 경우 기재하고, 제조의회자와 제조자가 다를 경우에는 제조자 항목에 제품이 실제 조립되거나 생산되는 곳을 기재하고, 제조의회자에 법적제조책임자를 기재.

※제조자가 다수인 경우 [입력->줄추가] 메뉴를 이용하여 다중 입력이 가능합니다.

○ 비교

[수출용에 한함 여부]	
[중고의료기기 여부]	
[일회용의료기기 여부]	
[추적관리대상 의료기기]	
[신개발 의료기기]	
[회소 의료기기]	
[동일성 검토]	
[동등제품 허가사항]	(, ,)
[동등공고제품]	(, , , ,)
[비교]	

[조합의료기기]

, ,

※조합의료기기가 여러건인 경우 [입력->줄추가] 메뉴를 이용하여 다중 입력이 가능합니다.

[한벌구성 의료기기]

, ,

※한벌구성 의료기기가 여러건인 경우 [입력->줄추가] 메뉴를 이용하여 다중 입력이 가능합니다.

○ 정보제공동의

[건강보험심사평가원]
[한국보건 의료연구원]

○ 모델명

[일련번호]	[모델명]	[수출용여부]
--------	-------	---------

--	--	--

※ 모델명중에 깨짐이 발생하는 문자(특수문자) 등은 직접 수정해주시기 바랍니다.

○ 포장단위

[일련번호] [포장단위]

○ 모양 및 구조

[작용원리]

[외 형]

[치 수]

[특 성]

○ 담당자

성 명:

이 메 일:

전화번호: ()

휴 대 폰:

※ 이메일 : 민원처리과정에서 발생하는 담당자의 의견을 메일로 통해 전달받기 원하는 경우 기재

※ 휴대폰 : 민원신청 내역의 처리 진행사항을 안내받기 원하는 경우 기재

「의료기기법」 제6조·제7조·제15조 및 같은 법 시행규칙 제5조제1항·제5조의2제1항·제8조제2항·제18조제1항·제18조제3항·제21조에 따라 위와 같이 의료기기의 제조(수입)허가를 신청합니다.

식품의약품안전처장 귀하
지방식품의약품안전청장 귀하

의료기기 기술문서 등 심사의뢰서



처리기간
1.임상시험 자료 심사대상 : 70일
2.기술문서 심사대상: 55일

의뢰인

[성명(대표자)]	[생년월일]	년 월 일
[주소]	()	

제조(수입)업소

[명칭(상호)]	
[소재지]	()
[사업자등록번호]	[업허가번호]

심사의뢰의 구분

[심사의 종류]	
[제조/수입 구분]	
[제품의 구분]	

상세내용

※[제품명]은 제출파일 생성 시 자동입력됩니다.

[제 품 명]	
[상 품 명]	
[업소명 표기 여부]	
[품 목 명]	
[품목분류번호]	
[등 급]	

사용목적

[사용목적]	
[성 능]	

신청항목

[원 재 료]	별첨
[제조방법]	별첨

[사용방법]	별첨
[사용 시 주의사항]	별첨
[저장방법]	별첨
[사용기한]	별첨
[시험규격]	별첨
[허가조건]	

○ 제조원

[제조의뢰자]	(,)
[제 조 자]	(,)

※제조자 항목은 제조의뢰자와 제조자가 동일할 경우 기재하고, 제조의뢰자와 제조자가 다를 경우에는 제조자 항목에 제품이 실제 조립되거나 생산되는 곳을 기재하고, 제조의뢰자에 법적제조책임자를 기재.

※제조자가 다수인 경우 [입력->줄추가] 메뉴를 이용하여 다중 입력이 가능합니다.

○ 비교

[일회용의료기기 여부]
[추적관리대상 의료기기]
[비고(신청근거)]
[조합의료기기]

, ,

※조합의료기기가 여러건인 경우 [입력->줄추가] 메뉴를 이용하여 다중 입력이 가능합니다.

○ 모델명

[일련번호]	[모델명]	[수출용여부]

※ 모델명중에 깨짐이 발생하는 문자(특수문자) 등은 직접 수정해주시기 바랍니다.

○ 포장단위

[일련번호]	[포장단위]

○ 모양 및 구조

[작용원리]
[외 형]
[치 수]
[특 성]

○ 담당자

성 명:

이 메 일:

전화번호: ()

휴 대 폰:

※ 이메일 : 민원처리과정에서 발생하는 담당자의 의견을 메일로 통해 전달받기 원하는 경우 기재

※ 휴대폰 : 민원신청 내역의 처리 진행사항을 안내받기 원하는 경우 기재

「의료기기법 시행규칙」 제7조제2항에 따라 위와 같이 의료기기 기술문서 등의 심사를 의뢰합니다.

식품의약품안전처장 귀하

기술문서심사기관장 귀하

일회용수동랜셋 기술문서 작성순서

1. [별지 제7호 서식 및 별지 제3호 서식(기술문서 일괄검토)] 이용 작성 시

번호	작성 항목 순서	해당 쪽 번호		비고
		부터	까지	
1	제품명 (상품명, 품목류명, 모델명)			
2	모양 및 구조			
3	원재료			
4	제조방법			
5	사용목적			
6	성능			
7	사용방법			
8	사용 시 주의사항			
9	포장단위			
10	저장방법 및 사용기한			
11	시험규격			
12	제조원			
13	첨부자료			

2. [민원서식작성기 7호 서식] 이용 작성 시

○ 기술문서 등 심사의뢰서

의뢰기기 기술문서 등 심사의뢰서

청리기간
1. 임상시험 자료 심사대상 : 70일 2DBarcode
2. 기술문서 심사대상 : 65일

○ 의뢰인

[성명(대표자)] 신청인(대표자) [생년월일] 0000년 00월 00일
[주소] (우편번호)신청인의 주소

○ 제조(수입)업소

[명칭(상호)] 업소명칭(상호)
[소재지] (우편번호)제조소의 소재지
[사업자등록번호] 사업자등록번호 [업허가번호] 업허가번호

○ 심사의뢰의 구분

[심사의 종류] 임상시험 자료 심사/기술문서 심사
[제조/수입 구분] 제조/수입
[제품의 구분] 제1종제품/제2종제품/제3종제품/제4종제품 (3,4종제품은 해당없음을 선택)

번호	작성 항목 순서
1	제품명(상품명, 품목류명, 모델명)
2	분류번호(등급)
3	모양 및 구조
4	원재료
5	제조방법
6	사용목적
7	사용방법
8	사용 시 주의사항
9	포장단위
10	저장방법 및 사용기한
11	시험규격
12	비고

[붙임3] [민원서식작성기 3호 서식]

○ 제조 허가신청서

의료기기 제조 허가신청서

처리기간
1. 임상시험 계획서 : 80일
2. 기술문서 : 65일
3. 기술문서 심사 : 10일

신청인

[성명(대표자)] 신청인(대표자) [생년월일] 0000년 00월 00일
[주소] (우편번호)신청인의 주소

제조 업소

[명칭(상호)] 업소명칭(상호)
[소재지] (우편번호)업소의 소재지
[사업자등록번호] 사업자등록번호 [업허가번호] 업허가번호

신청 구분

[품목류/품목] 품목류/품목
[심사의 종류] 심사불필요/기술문서 심사/임상시험 심사
[제품의 구분] 새로운제품/개량제품/동등제품 (1,2등급만 선택하세요)

번호	작성 항목 순서
1	제품명(상품명, 품목류명, 모델명)
2	분류번호(등급)
3	모양 및 구조
4	원재료
5	제조방법
6	사용목적
7	사용방법
8	사용 시 주의사항
9	포장단위
10	저장방법 및 사용기한
11	시험규격
12	비고

○ 수입 허가신청서

민원서작성프로그램 - [의료기기수입품목허가신청서(MFDS)]

파일(F) 편집(E) 보기(V) 입력(I) 모양(M) 도구(S) 창(W) 도움말(H)

의료기기수입품목허가신청서

- 신청내용
 - 신청서
 - 원재료
 - 제조방법
 - 사용방법
 - 사용시 주의사항
 - 저장방법
 - 사용기한
 - 시험규격
 - 기타 관리서류
 - 기타

의료기기 수입 허가신청서

처리기간
1.입상신청 : 80일
2.기술문서 : 60일
3.기술문서 : 10일

식품의약품안전처
2DBarcode

○ 신청인

[성명(대표자)] 신청인(대표자) [생년월일] 0000년 00월 00일
[주소] (우편번호)신청인의 주소

○ 수입 업소

[명칭(상호)] 업소명칭(상호)
[소재지] (우편번호)업소의 소재지
[사업자등록번호] 사업자등록번호 [업허가번호] 업허가번호

○ 신청 구분

[품목류/품목] 품목류/품목
[심사의 종류] 심사불필요/기술문서 심사/임상시험 심사
[제품의 구분] 새로운제품/개량제품/동등제품(1,2등급만 선택하세요)

번호	작성 항목 순서
1	제품명(상품명, 품목류명, 모델명)
2	분류번호(등급)
3	모양 및 구조
4	원재료
5	제조방법
6	사용목적
7	사용방법
8	사용 시 주의사항
9	포장단위
10	저장방법 및 사용기한
11	시험규격
12	비고

제품명

가. 품목(류)명

☞ 일회용수동랜셋의 품목(류)명과 등급은 「의료기기 품목 및 품목별 등급에 관한 규정」에 따라 분류된 품목류명, 품목분류번호 및 등급을 아래의 예와 같이 작성하시기 바랍니다.

예

- 1) 품목류명 : 일회용수동랜셋
- 2) 품목분류번호 : A53070.02
- 3) 등급 : 2등급

나. 상품명

☞ 상품명은 업체가 자율적으로 정한 상품명을 기재할 수 있으며, 기재하지 아니할 수도 있습니다. 상품명은 이미 허가를 받거나 신고한 의료기기의 명칭과 동일 하여서는 안됩니다.

예

- 1) 상품명 : MFDS

다. 모델명

☞ 국내에서 제조하는 경우에는 해당제품의 치수, 형상, 성능 등에 따라 각 회사에서 정한 세부모델명을 기재하시고, 수입 제품의 경우에는 제조원에서 정한 모델명을 아래의 예와 같이 작성해 주시기 바랍니다.

예

- 1) 모델명 : MFDS-01, MFDS-02

모양 및 구조 - 작용원리

- ㉠ 일회용수동랜싯의 용도 및 특성, 해당 제품을 개발하기 위하여 적용한 원리 등에 관한 내용을 요약하여 기술하시면 됩니다.
- ㉠ 허가된 '사용목적' 이외의 임상적 효능·효과 및 이와 관련된 용어가 표방되지 않도록 주의하시기 바랍니다.

예

본 제품은 스테인레스 스틸로 된 침과 폴리에틸렌으로 된 손잡이 및 보호커버로 구성되어 있으며, 채혈 등을 목적으로 사용하는 작은창 구조의 수동식 침으로 손잡이가 있다.

사용 후에는 채혈침 부분이 기기의 몸체 속으로 들어가기 때문에 재사용이 불가능한 일회용이다

모양 및 구조 - 외형

- 외관 사진: 일회용수동랜싯의 구체적인 형상을 확인할 수 있는 선명한 외관 사진을 부착하기 바랍니다.
- 외관 설명: 각 부분에 대한 명칭 및 역할, 코팅여부 등에 대해 설명하시기 바랍니다.

1. 외관사진

예




<전체 외관>



<침 보호 캡 분리 했을 시 외관>

2. 외관설명

예

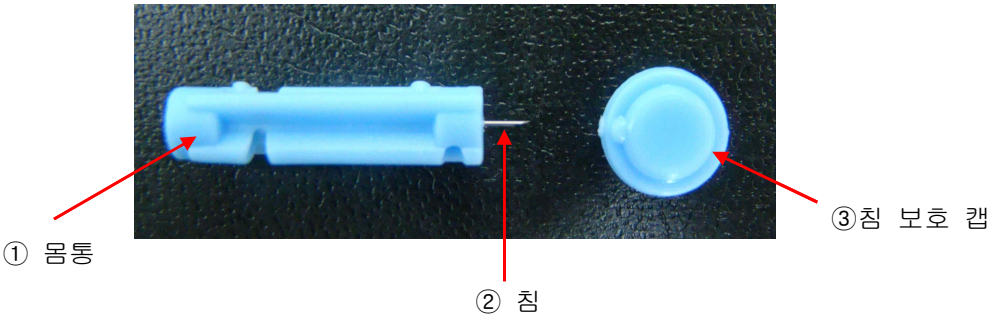


번호	명칭	기능
1	몸통	랜셋 침관을 고정시켜 침의 부착을 용이하게 한다.
2	침	피하에 삽입되는 부분으로서 채혈을 원활하게 한다.
3	침 보호 캡	침 날 끝을 보호하고 이물질의 흡입을 막아주며 찔림을 방지한다.

모양 및 구조 - 치수

- ☞ 일회용수동랜셋 및 구성품의 외관도면을 그리고, 각 부분을 지적하여 표시하고, 해당되는 부분에 대한 치수 및 중량을 아래의 예와 같이 작성해 주시기 바랍니다.

예

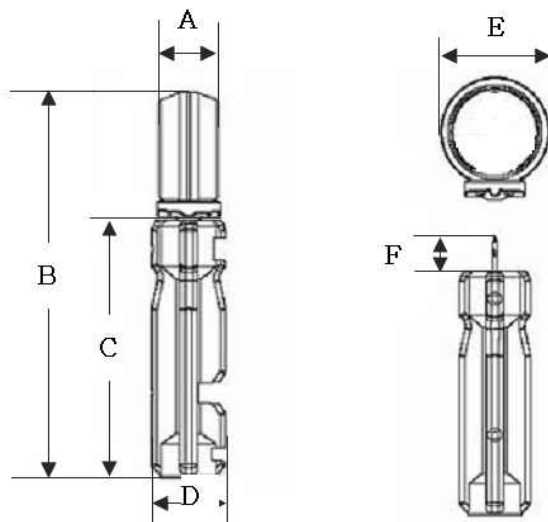

(단위: mm)

모델명	보호캡		홀더부		B(전체길이)	F(침길이)	중량(g)
	A(두께)	E(직경)	C(길이)	D(직경)			
MFDS-01	○○ mm	○○ mm	○○ mm	○○ mm	○○ mm	○○ mm	○.○g
MFDS-02	○○ mm	○○ mm	○○ mm	○○ mm	○○ mm	○○ mm	○.○g
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

원재료

㉡ 인체에 접촉·삽입되거나 인체에 주입하는 혈액·체액 또는 약물 등에 접촉하거나, 의약품이 첨가되는 의료기기의 경우에는 다음의 각목의 규정에 따라 기재하여 주시기 바랍니다.

일련 번호	부분품의 명칭	원재료명 또는 성분명	규격	분량	비고 (인체접촉여부 및 접촉부위)

1. 부분품의 명칭란에는 해당 의료기기를 구성하는 부분품별 명칭을 기재한다.
2. 원재료명 또는 성분명란에는 해당 의료기기의 부분품을 구성하는 각 원재료의 일반명 또는 화학명을 기재한다.
3. 규격란에는 원재료에 대한 규격이 있는 경우에는 해당 규격(KS, ASTM, ISO 등)을 기재하고, 규격이 없는 경우 자사규격을 기재한다.
4. 분량란에는 완제품·부분품 또는 재료 등을 구성하기 위하여 사용되는 원재료·첨가제 또는 색소 등의 분량(단위포함) 및 혼합비를 기재한다.
5. 비고란에는 인체접촉여부 및 접촉부위를 기재한다.
6. 의약품이 첨가되는 경우에는 해당 의약품의 명칭·성분·규격·분량을 1호 내지 4호에 준하여 기재하고 해당 의약품의 사용목적은 비고란에 기재한다.

※ 규격 용어 해설

아래 기재한 규격은 대표적인 예로써 이외의 규격도 적용될 수 있습니다.

- ISO(International Organization for Standardization) : 국제 표준화기구에서 정한 규격 명칭
- ASTM(American Society for Testing and Materials) : 미국 재료 시험 협회에서 정한 규격 명칭
- KS(Korean Industrial Standards) : 한국산업표준

㉡ 한벌구성의료기기의 경우에는 각각의 의료기기별로 기재하여 주십시오.

예

일련번호	부분품의 명칭	원재료명 또는 성분명	규격	분량	비고 (인체접촉여부 및 접촉부위)
1	보호 캡	고밀도 폴리에틸렌	자사규격 1	100%	비접촉
2	몸통	고밀도 폴리에틸렌	자사규격 1	100%	비접촉
3	침	스테인리스 강	KS D 3698	100%	인체접촉 (피하)
⋮	⋮	⋮	⋮		⋮

※ 원재료 작성은 「허가신청서 원재료 작성요령 가이드라인」에 따라 기재하십시오.

※ 침에 실리콘 오일이 도포된 경우 이에 대한 원자재명을 기재하고 사용된 실리콘오일은 ISO 7864에 적합하여야 한다.

[자사규격 예시]

원재료의 물리·화학적 특성을 확인할 수 있는 다음의 사항 등을 표 하단에 기재한다.

예) 자사규격1

- 녹는점 :
- 밀도 :
- 화학식 :

제조방법

㉠ 제조방법은 “제조원의 제조방법에 따른다.”라고 기재합니다. 다만, 멸균의료기기의 경우 멸균방법 및 멸균규격(규정 별표2) 등을 부가하여 기재하셔야 합니다.

예

가. 제조방법

: 제조원의 제조방법에 따른다.

※ **멸균제품**인 경우는 아래의 예와 같이 추가 기재하십시오.

나. 멸균방법 및 기준

(※ 습열멸균을 사용한 경우)

- 멸균방법 : 습열멸균 (ISO 17665-1,2)

(※ 산화에틸렌 멸균을 사용한 경우)

- 멸균방법 : 산화에틸렌 멸균 (ISO 11135-1,2)

(※ 방사선 멸균(전자빔 포함)을 사용한 경우)

- 멸균방법 : 방사선멸균 (ISO 11137-1,2)

- 멸균방법 : 전자빔멸균 (ISO 11137-1,2,3)

사용목적

1. 사용목적

- ㉞ 사용목적은 근거자료에 따라 적응증, 효능·효과 또는 사용 목적을 기재합니다. 다만, 근거자료가 없다면 「의료기기 품목 및 품목별 등급에 관한 규정」에 따라 기재하십시오.
- ㉞ 근거가 불명확하거나 막연하고 광범위한 의미의 표현을 하여서는 아니되며, 중복되거나 지나치게 강조한 표현, 오해 또는 오·남용의 우려가 있는 표현 등을 해서는 안됩니다.
 - 사용 목적을 작성할 때에는 사용 목적이 포함되어 있는 제조원의 사용설명서 또는 적응증, 효능·효과를 입증한 임상시험에 관한 자료를 근거로 기재합니다.

예

채혈 등을 목적으로 사용하는 작은창 구조의 수동식 침으로 손잡이가 있으며 일회용이다.

2. 성능

- ㉞ 성능은 해당 제품이 표방하는 제품의 물리·화학적 특성을 기재하시면 됩니다.
- ㉞ 사용설명서 또는 상품안내서에 있는 기술적 사양을 기재합니다.

예

1) 침투깊이 : ○○ mm

※ 신청 제품의 특성에 따라 작용횟, 침투시간, 침 뽑기 시험 등이 작성될 수 있습니다.

사용방법

☞ 사용방법은 다음 각 호에 따라 기재하십시오.

1. 사용방법은 사용 전의 준비사항, 조작방법, 사용 후의 보관 및 관리 방법을 상세히 기재하되, 전문가가 아닌 일반 소비자가 직접 사용하는 의료기기의 경우에는 사용 대상별(장애인, 임산부, 소아 등) 사용에 불편하지 않도록 알기 쉬운 용어로 기재하여야 합니다.
2. 사용 전 멸균을 하여야 하는 경우에는 식약처장이 인정하는 멸균방법을 정확히 기재하십시오.
3. 일회용 의료기기의 경우 “재사용 금지”를 명확하게 기재하십시오.

1. 사용전의 준비사항

☞ 일회용수동랜싯을 사용하기 전에 준비가 필요한 사항을 아래의 예와 같이 작성해 주시기 바랍니다.

예

- 1) 포장 및 제품에 파손이 있는지 확인하여야 한다.
- 2) 제품의 유효기간을 확인한다.
- 3) 사용하기 전에 사용방법을 숙지한다.
- 4) 소독을 위해 알콜을 사용하는 경우, 완전히 말린 후 채혈을 실시한다.

2. 조작방법

☞ 일회용수동랜싯의 사용 전 준비사항을 확인점검한 후, 제품의 정상적인 사용을 위하여 사용자가 취하여야 할 일련의 사용방법을 개조식으로 기술하고 아래의 예와 같이 작성해 주시기 바랍니다.

예

- 1) 랜싯 보호캡을 제거한다.

- 2) 시술 부위에 대고 랜싯을 작동한다.
- 3) 사용 후 랜싯을 제거하고, 제거한 보호캡에 랜싯을 꽂아 폐기한다.

3. 사용 후 보관 및 관리방법

☞ 일회용수동랜싯을 사용한 후의 보관 및 관리를 위해 필요한 조건 혹은 방법을 기재하며, 일회용 의료기기인 경우 “재사용 금지”를 명확하게 기재합니다.

예

- 1) 1회용 멸균제품으로 절대 재사용을 하지 않는다.
- 2) 영유아나 어린이의 손에 닿지 않게 보관한다.

사용 시 주의사항

- ㉮ 사용 시 주의사항은 해당 의료기기가 안전하고 합리적으로 사용할 수 있도록 필요한 최신의 안전성 관련 사항을 모두 기재하여야 합니다. 이 경우 의학용어 사전 등을 참고하여 이해하기 쉽도록 현대용어로 작성하여야 합니다.
 - ㉮ 다음 각 목에 의한 순서와 요령에 따라 기재하여 주십시오.
 - 가. 경고: 치명적이거나 극히 중대하고 비가역적인 이상반응이 나타날 경우 또는 이상반응이 나타난 결과 극히 중대한 사고에 관련될 가능성이 있으므로 특히 주의를 환기할 필요가 있을 경우를 기재하십시오.
 - 나. 의료기기의 특성을 고려한 사용대상 연령, 성별 또는 건강상태 등에 대한 주의사항을 기재하십시오.
 - 다. 의료기기의 사용결과 발생할 수 있는 이상반응 사용상의 부주의에 따른 치명적인 부작용·사고발생 등에 대한 주의사항을 기재하십시오.
 - 라. 일반적 주의: 의료기기로 인한 중대한 사고를 방지하기 위하여 사용 중 주의사항을 기재하고 필요한 경우 사고발생 시 처리방법 등도 기재하십시오.
 - 마. 상호작용: 다른 의료기기와 병용 시 해당 의료기기가 병용의료기기의 작용을 증강 또는 감약시키거나 이상반응의 증강이 일어날 경우 또는 새로운 이상반응이 발생하거나 원질환의 악화 등이 일어날 경우로서 임상적으로 의의가 있는 사항을 기재하십시오.
 - 바. 임부, 수유부, 가임여성, 신생아, 유아, 소아, 고령자에 대한 사용: 해당 의료기기의 기능적 특성·사용방법 등으로 볼 때 다른 환자에 비하여 특히 주의할 필요가 있다고 판단되는 사항을 기재하십시오.
 - 사. 적용상의 주의: 사용방법 등에 따른 필요한 주의를 기재하십시오.
 - 아. 안전사고의 예방에 필요한 사항이 있는 경우에는 관련 주의사항을 기재하십시오.
- ※ 작성된 아래의 예는 단순히 예시에 불과합니다. 그대로 복사를 하거나 인용하여 사용하지 마시고 허가받고자 하는 제품의 특성을 충분히 고려하여 작성하여 주시기 바랍니다.

가. 경고

- 1) 감염의 위험성이 있으므로, 채혈 부위를 반드시 소독하고, 채혈 후에는 반창고 등을 사용하여 채혈 부위를 보호 및 지혈한다. 상처가 잘 낫지 않는 경우에는 의사의 진찰을 받아야한다.
- 2) 채혈 후 침에는 잔여 혈액이 있으므로, 혈액을 통한 감염을 막기 위해 사용 후 다른 사람에게 닿지 않도록 폐기해야한다.

나. 일반적 주의

- 1) 제품의 사용목적 이외의 사용을 금한다.
- 2) 일회용 제품이므로 보호캡이 파손 되어있거나, 침이 보호캡 밖으로 노출되어 있는 경우에는 사용하지 않는다.
- 3) 유효기한이 지난 랜셋은 사용하지 않는다.
- 4) 사용이 끝난 랜셋은 보호캡을 삽입한 후에, 지정된 장소에 폐기한다.

포장단위

㉞ 취급상 용이한 최소 단위로 정하여 기재하며, 제조 의료기기의 경우에는 “자사 포장 단위”로, 수입 의료기기의 경우에는 “제조원 포장단위”로 기재할 수 있습니다.

예

가. 제조 의료기기 : 1set, 1box, 1pack 또는 ‘자사 포장단위’

나. 수입 의료기기 : 1set, 1box, 1pack 또는 ‘제조원 포장단위’

저장방법 및 사용기한

㉠ 저장방법 및 사용기한은 각 호에 따라 기재하십시오.

- ① 저장방법은 의료기기의 특성을 고려하여 안정성이 보장될 수 있도록 구체적인 보관조건(온도 등) 및 유의사항 등을 병기하여야 합니다.
- ② 사용기한(유효기한)은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 식약처장이 고시한 「의료기기의 안정성시험 기준」(식품의약품안전처 고시)에 따라 저장방법 및 사용기한(유효기한) 설정하여 기재하십시오.
 1. 멸균의료기기
 2. 시간이 경과됨에 따라 원재료 등의 물리·화학적 변화로 인한 안전성 또는 성능의 변화가 예측되는 의료기기

예

1) 저장방법

- (1) 온도 : - OO ~ OO ℃
- (2) 습도 : O ~ OO %

2) 포장방법

- (1) 포장재질 : 1차포장: Paper box
2차포장: cardboard box
- (2) 포장방법 : 박스에 수량에 맞게 담아 포장한다.

예

3) 사용기한

제조일로부터 □년

※ 참고 : 유효기한 설정의 근거자료를 제출하십시오.

시험규격

- ㉮ 시험규격은 해당 제품의 안전성 및 성능을 검증하기 위하여 필요한 시험을 기재합니다.
 1. 안전성의 경우 해당 제품의 특성에 따라 식약처장이 고시한 「의료기기의 생물학적 안전에 관한 공통기준규격」 및 「의료기기 기준규격」 중 해당 규격을 기재하거나, 이와 동등한 국제 규격(ISO 등)을 기재합니다.
 2. 성능은 자사가 설정한 근거에 의한 시험항목, 시험기준 및 시험방법을 기재합니다.
 - 시험기준은 시험결과의 적부판정의 기준이 되는 기준치의 허용범위를 명확히 기재하며, 시험결과가 온도·습도 등 주위 조건에 영향을 받는 경우에는 그 조건을 명시하여야 합니다.
 - 시험방법은 구체적으로 순서에 따라 시험결과를 정확히 산출할 수 있도록 개조식으로 기재합니다.
 - 물리·화학적 시험은 식약처장이 인정한 규격(KS, ISO, ASTM 등)이 있을 경우 해당규격을 기재하며, 식약처장이 인정한 규격이 없는 제품의 경우에는 자사가 설정한 근거에 의한 시험항목, 시험기준 및 시험방법을 기재합니다.
- ㉮ 조합의료기기 및 한벌구성 의료기기의 경우에는 의료기기 전체로서 평가하여야 하는 부분과 각각의 의료기기별로 평가하여야 할 부분의 시험규격을 각각 설정합니다.
- ㉮ 본 시험규격은 해당 제품의 특성에 따라 수정, 추가 및 삭제할 수 있습니다.
- ※ 작성된 아래의 예는 단순히 예시에 불과합니다. 그대로 복사를 하거나 인용하여 사용하지 마시고 허가받고자 하는 제품의 특성을 충분히 고려하여 작성하여 주시기 바랍니다.



1. 안전성 시험규격

- 「의료기기의 생물학적 안전에 관한 공통기준규격」에 따른다.

2. 성능 시험규격

번호	시험항목	시험기준	시험방법
1	성상	외관상의 흠 또는 파손 등이 없어야 하고, 침은 끝이 예리하고 적당한 크기의 몸체와 견고히 연결되어 있어야 한다.	육안으로 관찰한다.
2	치수	치수항에서 제시된 표시치수의 $\pm 5\%$ 범위 이내에 있어야 한다.	버니어 캘리퍼스, 마이크로메타 등을 이용하여 측정한다.
3	침 내외면	1) 침 보호덮개가 떨어져 나간 것이 없어야 한다. 2) 침에 요철이나 흠이 없어야 한다. 3) 침의 날은 예리하게 연마되어 있어야 하고 구부러짐이 없어야 한다.	육안으로 검사한다.
4	뽑 기	시험방법에 따라 시험하였을 때, 침이 몸통에서 뽑히지 않아야 한다.	몸통으로부터 침을 뽑는 방향으로 20N의 최소하중을 가할 때 침이 몸통으로 부터 뽑혀 지는지를 시험한다.

제조원

☞ 제조원은 다음 각 호에 따라 기재하시면 됩니다.

1. 제조원의 기재내용은 자사제조 및 전공정위탁제조인 경우로 나누어 기재하여야 한다. 제조업허가를 받은 경우 별도로 제조의 경우에 대해 기재하지 않는다.
2. 수입 의료기기의 경우에는 제조원의 제조국, 제조사명 및 주소를 기재한다.
3. 모든 제조공정을 위탁하여 제조하는 경우에는 제조의뢰자와 제조자의 상호와 주소를 모두 기재한다. 다만, 제조자가 외국회사일 경우에는 제조국을 추가로 기재한다.

예

구 분	기 재 내 용
수입의 경우	· 미국, ABCD Inc, 10903 Hampshire Ave Silver Spring, MD 20993
전공정위탁제도 (제조, 수입품목 공통)	제조의 경우 · 제조의뢰자 : (주)식약처, 충북 청원군 오송읍 643번지 · 제조자 : (주)오송의료기기, 서울시 은평구 불광동 123번지
	수입의 경우 · 제조의뢰자 : 미국, ABCD Ltd, 10903 Hampshire Ave Silver Spring, MD 20993 · 제조자 : 미국, EFGH Inc, 1301 Clay Street, Suite 1180 Oakland, CA 94512

기술문서 심사에 관한 자료

- ㉠ 아래의 첨부자료들은 기술문서 등 심사에 있어서 요건자료들 이므로 반드시 첨부하십시오.
- ㉠ 첨부자료는 각 자료별로 구분하여 첨부하고, 당해 의료기기에 관한 자료임을 확인할 수 있는 자료로 제출하십시오.
- ㉠ 「의료기기 허가·심사·신고 등에 관한 규정」 제24조(심사자료의 종류 및 범위 등)에 따라 제출하여야 하는 자료의 종류는 다음과 같습니다.
 1. 기 허가 제품과 비교한 자료
 2. 사용목적에 관한 자료
 3. 작용원리에 관한 자료
 4. 제품의 성능 및 안전을 확인하기 위한 다음 각 목의 자료로서 시험규격 및 그 설정근거와 실측치에 관한 자료. 다만, 국내 또는 국외에 시험규격이 없는 경우에는 기술문서 등의 심사를 받으려는 자가 제품의 성능 및 안전을 확인하기 위하여 설정한 시험규격 및 그 근거와 실측치에 관한 자료
 - 가. 전기·기계적 안전에 관한 자료
 - 나. 생물학적 안전에 관한 자료
 - 다. 방사선에 관한 안전성 자료
 - 라. 전자파안전에 관한 자료
 - 마. 성능에 관한 자료
 - 바. 물리·화학적 특성에 관한 자료
 - 사. 안정성에 관한 자료
 5. 기원 또는 발견 및 개발경위에 관한 자료
 6. 임상시험에 관한 자료
 7. 외국의 사용현황 등에 관한 자료

㉞ 다만, 동 규정 제25조(심사 자료의 면제)에 제 2항에 따라 제24조제5호부터 7호까지의 규정에 따른 자료는 동 규정 [별표6] 기술문서 등 제출 자료의 범위에 따라 면제될 수 있습니다.

㉞ 제26조(첨부자료의 요건)에 따라 기술문서 등 심사에 관한 첨부자료는 다음과 같습니다.

1. 기 허가 제품과 비교한 자료

기존 허가 받은 제품과 품목명(분류번호 및 등급), 제조(수입)업소명, 제조원 및 소재지, 허가번호, 사용목적, 작용원리, 원재료, 성능, 시험규격, 사용방법 등을 비교한 별지 제3호 서식의 비교표

2. 사용목적에 관한 자료

해당 제품의 적응증, 사용목적(효능·효과)에 관한 자료

3. 작용원리에 관한 자료

해당 제품의 사용목적을 달성하기 위해 영향을 미치는 물리·화학·전기·기계적 작용원리에 관한 자료

4. 전기·기계적 안전에 관한 자료

가. 일반사항

전기를 사용하는 의료기기의 경우에 제출하여야 하며, 다음 중 어느 하나에 해당되는 자료로서 해당 제품과 모델명이 동일하여야 한다. 다만, 개발 시 명칭 등으로 자료상의 모델명과 해당 제품의 모델명이 동일하지 않은 경우에는 이를 입증하는 자료를 제출하여야 한다.

1) 식약처장이 지정한 시험검사기관에서 발급한 시험성적서

2) 국제전기기술위원회(IEC)가 운영하는 국제전기기기인증제도(IECEE CB-Scheme)에 따라 국제공인시험기관(NCB : National Certification Body)에서 발급한 시험 성적서

3) 한국인정기구(KOLAS: Korea Laboratory Accreditation Scheme)(이하 “KOLAS”라

한다)에서 인정한 의료기기 분야의 시험검사기관에서 인정된 규격코드로 적합하게 발급한 시험성적서

- 4) 해당 의료기기에 대하여 경제협력개발기구(OECD) 회원국에 허가 당시 제출되어 평가된 시험성적서로 해당 정부 또는 정부가 허가 업무를 위임한 등록기관이 제출받아 승인하였음을 확인한 자료 또는 이를 공증한 자료

나. 기준 및 시험방법

「의료기기의 전기·기계적 안전에 관한 공통기준규격」(식품의약품안전처 고시) 또는 이와 동등 이상의 국제규격(IEC 등)에 따르되, 「전기사업법」에 의한 국내 표준전압, 표준주파수, 표준전원플러그 등 기준을 따라야 한다.

5. 생물학적 안전에 관한 자료

가. 일반사항

인체에 접촉·삽입되거나 인체에 주입하는 혈액·체액 또는 약물 등과 접촉하는 의료기기 또는 부분품의 경우 제출하여야 하며, 다음 중 어느 하나에 해당하는 자료로서 해당 제품과 모델명이 동일하여야 한다. 다만, 개발 시 명칭 등으로 자료상의 모델명과 해당 제품의 모델명이 동일하지 않은 경우에는 이를 입증하는 자료를 제출하여야 하며, 무균시험 및 EO가스 잔류량 시험의 경우에는 「의료기기 제조 및 품질관리기준」(식품의약품안전처 고시) 또는 이와 동등 이상의 규격에 따른 제조사의 품질관리시스템 하에서 실시한 시험성적서를 제출할 수 있다.

- 1) 식약처장이 지정한 시험검사기관에서 발급한 시험성적서
- 2) 경제협력개발기구(OECD)의 비임상관리기준(GLP)에 의하여 공인받은 GLP 시험기관에서 발급한 GLP 시험자료
- 3) 1) 또는 2)에 해당하는 자료로서 해당 제품과 원재료가 동일하고 인체접촉시간·인체접촉부위 등이 동등하거나 동등이상인 제품의 생물학적 안전에 관한 자료

나. 기준 및 시험방법

「의료기기의 생물학적 안전에 관한 공통기준규격」(식품의약품안전처 고시) 또는 이와 동등 이상의 국제규격(ISO 등)에 따른다.

6. 전자파안전에 관한 자료

가. 일반사항

전자파 안전성이 요구되는 의료기기 또는 부분품의 경우 제출하여야 하며, 다음 중 어느 하나에 해당되는 자료로서 해당 제품과 모델명이 동일하여야 한다. 다만, 개발 시 명칭 등으로 자료상의 모델명과 해당 제품의 모델명이 동일하지 않은 경우에는 이를 입증하는 자료를 제출하여야 한다.

- 1) 식약처장이 지정한 시험검사기관에서 발급한 시험성적서
- 2) 국제전기기술위원회(IEC)가 운영하는 국제전기기기인증제도(IECEE CB-Scheme)에 따라 국제공인시험기관(NCB : National Certification Body)에서 발급한 시험성적서
- 3) KOLAS에서 인정한 의료기기 분야 시험검사기관에서 인정된 규격코드로 적합하게 발급한 시험성적서
- 4) 해당 의료기기에 대하여 경제협력개발기구(OECD) 회원국에 허가 당시 제출되어 평가된 시험성적서로 해당정부 또는 정부가 허가 업무를 위임한 등록기관이 제출받아 승인하였음을 확인한 자료 또는 이를 공증한 자료

나. 기준 및 시험방법

「의료기기의 전자파안전에 관한 공통기준규격」(식품의약품안전처 고시) 또는 이와 동등이상의 국제규격(IEC 등)에 따르되, 「전기사업법」에 의한 국내 표준전압, 표준주파수, 표준전원플러그 등의 기준을 따라야 한다.

7. 성능에 관한 자료

가. 일반사항

다음 중 어느 하나에 해당되어야 하며, 해당 제품과 모델명이 동일하여야 한다. 다만, 개발 시 명칭 등으로 자료상의 모델명과 해당 제품의 모델명이 동일하지 않은 경우에는 이를 입증하는 자료를 제출하여야 하며, 소프트웨어가 내장되어 있거나 단독으로 사용되는 경우 소프트웨어의 모델명 또는 명칭, 버전, 운영환경, 구조 등을 포함하여 주요기능을 검증할 수 있는 자료를 제출하여야 하고, 동물을 대상으로 한 성능 확인이 필요한 경우 동물시험 자료를 제출하여야 한다.

- 1) 식약처장이 지정한 시험검사기관에서 발급한 시험성적서
- 2) 대학 또는 연구기관 등 국내·외의 전문기관에서 시험한 것으로서 해당 기관의 장이 발급하고 그 내용(기관의 시험시설 개요, 주요설비, 연구인력 구성, 시험자의

연구경력 등을 포함한다)을 검토하여 타당하다고 인정할 수 있는 시험성적서.

- 3) 「의료기기 제조 및 품질관리기준」(식품의약품안전처 고시) 또는 이와 동등 이상의 규격에 따른 제조사의 품질관리시스템 하에서 실시한 제품의 성능에 관한 시험성적서

나. 기준 및 시험방법

자사의 기준 및 시험방법에 따른다.

8. 물리·화학적 특성에 관한 자료

가. 일반사항

인체에 접촉·삽입되거나 인체에 주입하는 혈액·체액 또는 약물 등에 접촉하는 의료기기의 경우 해당되는 부분에 대한 화학구조, 적외선흡수, 자외선흡수, 원자흡광도, 용점, 비점, 내구성, 경도, 색조, 용출물, 표면특성 자료 등은 다음 각 단의 어느 하나에 해당되어야 하며, 해당 제품과 모델명이 동일하여야 한다. 다만, 개발 시 명칭 등으로 자료상의 모델명과 해당 제품의 모델명이 동일하지 않은 경우에는 이를 입증하는 자료를 제출하여야 한다.

- 1) 식약처장이 지정한 시험검사기관에서 발급한 시험성적서
- 2) 대학 또는 연구기관 등 국내·외의 전문기관에서 시험한 것으로서 해당 전문기관의 장이 발급하고 그 내용(기관의 시험시설 개요, 주요설비, 연구인력 구성, 시험자의 연구경력 등을 포함한다)을 검토하여 타당하다고 인정할 수 있는 시험성적서 또는 자료
- 3) 「의료기기 제조 및 품질관리기준」(식품의약품안전처 고시) 또는 이와 동등 이상의 규격에 따른 제조사의 품질관리시스템 하에서 실시한 물리·화학적 특성에 관한 시험성적서 또는 자료

나. 기준 및 시험방법

식약처장이 인정한 원재료 및 완제품에 대한 규격에 적합한 기준 및 시험방법에 따른다. 다만, 식약처장이 인정하는 규격이 없는 경우에는 자사의 기준 및 시험방법에 따른다.

9. 안정성에 관한 자료

가. 일반사항

다음 중 어느 하나에 해당되는 자료로서, 해당 제품과 모델명이 동일하여야 한다. 다만, 개발 시 명칭 등으로 자료상의 모델명과 해당 제품의 모델명이 동일하지 않은 경우에는 이를 입증하는 자료를 제출하여야 한다.

- 1) 식약처장이 지정한 시험검사기관에서 발급한 시험성적서
- 2) 대학 또는 연구기관 등 국내·외의 전문기관에서 시험한 것으로서 해당 전문기관의 장이 발급하고 그 내용(전문기관의 시험시설 개요, 주요설비, 연구인력 구성, 시험자의 연구경력 등을 포함한다)을 검토하여 타당하다고 인정할 수 있는 시험성적서
- 3) 「의료기기 제조 및 품질관리기준」(식품의약품안전처 고시) 또는 이와 동등 이상의 규격에 따른 제조사의 품질관리시스템 하에서 실시한 제품의 안정성에 관한 시험성적서

나. 기준 및 시험방법

「의료기기 안정성시험 기준」(식품의약품안전처 고시)에 따른다.

10. 기원 또는 발견 및 개발경위에 관한 자료

해당 제품에 대해 심사에 도움을 줄 수 있도록 육하원칙(예: 언제, 어디서, 누가, 새로 발견한 작용원리 및 원재료, 기초시험·임상시험 등에 들어간 것은 언제, 어디서 였나 등)에 따라 명료하게 기재된 자료

11. 임상시험에 관한 자료

가. 일반사항

임상시험에 사용되는 의료기기의 안전성 및 유효성을 증명하기 위하여 사람을 대상으로 시험한 자료로서 다음 중 어느 하나에 해당되어야 한다. 다만, 1, 2등급 의료기기의 경우에는 신청한 제품과 동등한 제품의 임상시험에 관한 자료(논문, 문헌 등)를 제출할 수 있다.

- 1) 식약처장이 지정한 임상시험기관에서 시험한 자료
- 2) 외국자료로서 그 내용을 검토하여 실시기관의 신뢰성이 인정되고 「의료기기 임상시험 관리기준」(식품의약품안전처 고시)에 의하여 실시한 것으로 판단되는 자료

- 3) 해당 의료기기에 대하여 경제협력개발기구(OECD) 회원국에 허가 당시 제출되어 평가된 임상시험에 관한 자료로서 해당 정부 또는 정부가 허가 업무를 위임한 등록기관이 제출받아 승인하였음을 확인한 자료 또는 이를 공증한 자료
- 4) 과학논문인용색인(Science Citation Index)에 등재된 전문학회지에 게재된 자료
- 나. 가목 1) 또는 2)에 해당하는 자료는 다음의 사항을 포함하여야 한다.

1) 임상시험방법

임상시험방법은 다음의 사항을 포함해야 한다.

가) 피험자의 선정기준, 제외기준 및 목표한 피험자의 수

원칙적으로 하나의 적응증마다 해당 의료기기의 특성과 임상시험방법 등을 종합적으로 고려하여, 통계적으로 타당하게 임상시험 예수가 결정되었음을 입증하는 자료. 다만, 적응질환의 발생 증례 자체가 적어 임상시험 예수의 확보가 현실적으로 곤란한 경우에는 이를 입증할 수 있는 자료를 추가로 첨부하여야 한다.

나) 조작방법 또는 사용방법과 그 설정사유

다) 비교시험용 의료기기를 사용하는 경우 그 선택사유

라) 병용사용의 유무

마) 관찰항목, 측정항목, 임상검사항목, 측정기준 및 검사방법

바) 유효성 평가기준, 평가방법 및 해석방법

사) 부작용을 포함한 안전성의 평가기준 및 시험방법

2) 임상결과

임상결과는 다음의 사항을 포함해야 한다.

가) 임상시험의 성적(임상례에 대한 계획된 수, 실제 대상수, 완료된 수, 중도탈락자 수 및 이유 등을 포함하며, 이 경우 피험자별 부작용 등에 대한 사항이 포함되어야 한다)

나) 증례기록 요약

다) 기타 임상시험성적의 확인에 필요한 자료

3) 임상평가

해당 적응증에 대한 의료기기의 유효율이 의학적·한의학적 원리에 기준하여 임상적 유의성이 있음을 입증하는 자료로 그 타당성이 판단되는 경우 이를 인정할 수 있다.

다. 기타

- 1) 민족적 요인의 차이가 있어 외국임상시험에 관한 자료를 그대로 적용하기가 어렵다고 판단되는 경우, 처장은 국내에서 우리나라 사람을 대상으로 한 자료를 추가 제출할 것을 요구할 수 있다.
- 2) 생명을 위협하는 희귀한 질환에 적용되는 희소의료기기의 경우에는 처장이 타당하다고 인정하는 범위의 임상시험에 관한 자료로 갈음할 수 있다.

12. 외국의 사용현황 등에 관한 자료

해당 의료기기 유효성에 대한 심사에 도움을 줄 수 있도록 각 국가의 사용현황에 관한 자료로서 외국의 판매 또는 허가현황, 사용 시 보고된 부작용, 제조허가 경위 등과 관련된 자료, 제조국에서 사용되지 않는 경우는 그 사유

※ 첨부자료의 작성은 「의료기기 허가·심사 첨부자료 가이드라인」을 참고하시기 바랍니다.

「의료기기 허가·심사·신고 등에 관한 규정」

[별표6] A53000 주사침 및 천자침

<기술문서 첨부자료 제출 자료 범위>

제출자료 구분		1	2	3	4-가	4-나	4-다	4-라	4-마	4-바	4-사	5	6	7
		본질적 동등 품목 비교 표	사용 목적	작용 원리	전기	방사선	전자파	생물학적	성능	물리 화학	안정성	임상	기원·발견 및 개발 경위	외국 사용 현황
1. 새로운 제품	가. 사용목적이 다른 것	○	○	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○
	나. 작용원리가 다른 것	○	×	○	×	×	×	○	○	○	○	×	○	○
	다. 원재료가 다른 것	○	×	×	×	×	×	○	○	○	○	×	○	○
	2. 개량 제품													
	라. 성능이 다른 것	○	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×
	마. 시험규격이 다른 것	○	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×
3. 동등제품	바. 사용방법이 다른 것	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○
		○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

○ : 제출하여야 하는 자료, × : 면제되는 자료, △ : 개개 제품에 따라 판단하여야 하는 자료

※ 조합되거나 한벌 구성된 의료기기 또는 전기를 사용하는 제품의 경우는 ‘전기분야’의 자료를 추가로 제출하여야 함

㉠ 제26조(첨부자료의 요건)에 따라 기술문서 등 심사에 관하여 첨부하여야 할 자료는 다음과 같습니다.

1. 기허가 제품과 비교한 자료

다음의 별지 제3호 서식의 비교표를 이용하여 기 허가된 제품과의 차이가 명확하게 입증되도록 필요한 항목을 기재합니다.

본질적 동등품목 비교표

번호	비교항목 ¹⁾	기허가 제품	신청제품	동등여부 ²⁾
1	품목명 (분류번호 및 등급)	일회용수동랜릿 (A53070.02, 2등급)	일회용수동랜릿 (A53070.02, 2등급)	
2	제품명(모델명)	MFDS-01 외 4종	Osong 외 2종	
3	제조(수입) 업소명	KFDA	OSONG	
4	제조원 및 소재지	-	-	
5	허가번호	제허00-00호	-	
6	사용목적	채혈 등을 목적으로 사용하는 작은창구조의 수동식 침으로 일회용이다.	채혈 등을 목적으로 사용하는 작은창구조의 수동식 침으로 일회용이다.	예 ☒ 아니오 ☐
7	작용원리	본 제품은 스테인레스 스틸로 된 침과 폴리에틸렌으로 된 손잡이 및 보호커버로 구성되어 있으며, 채혈 등을 목적으로 사용하는 작은창 구조의 수동식 침으로 손잡이가 있다. 사용 후에는 채혈침 부분이 기기의 몸체 속으로 들어가기 때문에 재사용이 불가능한 일회용이다.	본 제품은 스테인레스 스틸로 된 침과 폴리에틸렌으로 된 손잡이 및 보호커버로 구성되어 있으며, 채혈 등을 목적으로 사용하는 작은창 구조의 수동식 침으로 손잡이가 있다. 사용 후에는 채혈침 부분이 기기의 몸체 속으로 들어가기 때문에 재사용이 불가능한 일회용이다.	예 ☒ 아니오 ☐
8	원재료	고밀도 폴리에틸렌 304 스테인리스 강	고밀도 폴리에틸렌 304 스테인리스 강	예 ☒ 아니오 ☐
9	성능	침투깊이: ○ mm ※ 신청 제품의 특성에 따라 작용힘, 침투시간, 침 뽑기 시험 등을 작성	침투깊이: ○ mm ※ 신청 제품의 특성에 따라 작용힘, 침투시간, 침 뽑기 시험 등을 작성	예 ☐ 아니오 ☒

10	시험규격	☐ 의료기기의 생물학적 안전에 관한 공통기준규격	☐ 의료기기의 생물학적 안전에 관한 공통기준규격	예 ☒ 아니오 ☐
11	사용방법	1.사용 전의 준비 사항 1)사용하기 전에 제품 외관 등에 파손이 없는지를 확인한다. 2)사용하기 전에 사용방법을 숙지한다. 3)유효기간을 확인한다. 2.조작방법 1)랜싯보호캡을 제거한다. 2)시술부위에 작동후, 보호캡을 끼워 폐기한다. 3.사용 후의 보관 및 관리 방법 1)일회용 제품으로 사용 후 폐기한다.	1.사용 전의 준비 사항 1)사용하기 전에 제품 외관 등에 파손이 없는지를 확인한다. 2)사용하기 전에 사용방법을 숙지한다. 3)유효기간을 확인한다. 2.조작방법 1)랜싯보호캡을 제거한다. 2)시술부위에 작동후, 보호캡을 끼워 폐기한다. 3.사용 후의 보관 및 관리 방법 1)일회용 제품으로 사용 후 폐기한다.	예 ☒ 아니오 ☐
위와 같이 동등함을 확인하였음. 2013년 7월 1일 신청자 홍길동 (서명 또는 인)				

2. 사용목적에 관한 자료

해당 제품의 적응증, 사용목적(효능·효과)에 관한 자료로 당해 제품의 종류 및 구성, 제품설명서(안내서), 카달로그, 사용원리, 사용범위 및 사용방법 등에 관한 자료가 해당합니다. 근거자료가 없는 경우 사용목적은 「의료기기 품목 및 품목별 등급에 관한 규정」에 따라 기재합니다.

3. 작용원리에 관한 자료

해당 제품의 사용목적을 달성하기 위해 영향을 미치는 물리·화학적 작용원리에 관한 자료로, 해당 제품의 작용원리에 대한 논문, 문헌 등을 발췌하여 제출합니다.

4. 생물학적 안전에 관한 자료

- 「의료기기의 생물학적 안전에 관한 공통기준규격」 또는 동등 이상의 국제규격에 따라 시험한 자료가 해당됩니다. 멸균침의 경우 급성독성, 세포독성, 감작성, 자극성 (피내반응), 발열성, 유전독성시험, 이식시험, 무균시험 등이 해당됩니다.
- 무균시험 및 EO가스 잔류량 시험의 경우 「의료기기 제조 및 품질관리기준」 또는 이와 동등 이상 규격(ISO13485, EU MDD 93/42/EEC Annex II 등)에 따른 제조사의 품질관리시스템 하에서 시행된 시험성적서를 제출할 수 있습니다.

5. 성능에 관한 자료

- 당해 제품의 성능에 관한 시험규격으로 제시된 시험자료가 해당됩니다.

6. 물리·화학적 특성에 관한 자료

1) 제품을 구성하는 모든 부분품의 각 원자재에 대한 자료가 해당됩니다.

가. 원자재가 ASTM 등 식약처장이 인정한 규격에 해당하는 경우

- 원자재가 해당 규격에 적합함을 증명하는 자료
- 해당 규격에서 요구되는 특성에 적합함을 증명하는 자료

나. 원자재가 식약처장이 인정한 규격에 해당되지 않는 경우

- 원자재 구성성분 및 그 함량에 대한 증명서
- 각 원자재의 물질정보와 안전성에 관한 자료

2) 각 제품의 치수에 관한 자료

- 각 세부모델명별 치수가 기재된 제출용 도면(심사 모델명과 도면상의 모델명이 상이한 경우 동일제품임을 확인할 수 있는 증명서 포함)

7. 안정성에 관한 자료

- 가속노화시험 또는 장기보존시험을 통해 제품의 사용기한, 포장재의 유효성을 평가한 자료로써, 「의료기기의 안정성시험 기준」(식품의약품안전처 고시)에 따라 시험한 자료가 해당됩니다.
- 「의료기기 제조 및 품질관리기준」 또는 이와 동등 이상 규격(ISO13485, EU MDD 93/42/EEC Annex II 등)에 따른 제조사의 품질관리시스템 하에서 시행된 시험 성적서인 경우 인정될 수 있습니다.

8. 기원 또는 발견 및 개발경위에 관한 자료

- 해당 제품에 대해 심사에 도움을 줄 수 있도록 제품의 기원, 발견, 개발경위를 육하원칙에 따라 기재한 자료가 해당되며, 다음의 사항이 포함되어야 합니다.
- 1) 당해 의료기기에 대한 판단에 도움을 줄 수 있도록 6하 원칙에 따라 명료하게 기재된 자료(예 : 언제, 어디서, 누가, 무엇으로부터 개발하였고 개발의 근원이 된 것은 무엇이며, 기초시험·임상시험 등에 들어간 것은 언제, 어디서였나 등)
- 2) 제안된 효능·효과 및 작용원리는 무엇이며 국내 기허가 품목 중 유사한 작용원리를 이용한 제품이 있는가?
- 3) 의료기기의 물리·화학적, 전기·기계적 중요사항은 무엇인가?
- 4) 신청 의료기기에 대한 특이사항이 있는가?(예, 기존 의료기기에 비해 부작용을 감소시키고 성능이 개선되었는가 등)
- 5) 국내 임상시험을 실시한 품목의 경우 승인된 임상시험계획에 관한 사항이 간략하게 기술된 자료

9. 임상시험에 관한 자료

해당 제품에 대한 안전성과 유효성을 증명하기 위하여 사람을 대상으로 시험한 자료를 말하며, 별표6에 해당하는 경우는 임상자료를 필요로 합니다.

10. 외국의 사용현황 등에 관한 자료

해당 의료기기 유효성에 대한 심사에 도움을 줄 수 있도록 각 국가의 사용현황에 관한 자료

- 외국의 판매 또는 허가현황
- 사용 시 보고된 부작용
- 제조허가 경위 등과 관련된 자료
- 제조국에서 사용되지 않는 경우는 그 사유

※ 성능, 물리·화학적 특성, 안정성에 관한 시험성적서에는 다음의 사항이 포함되어야 합니다.

- 1) 시험기관의 명칭 및 주소
- 2) 시험검사 의뢰 업체명, 대표자명 및 주소

- 3) 시험성적서의 일련번호 및 각 페이지와 전체 페이지 번호
 - 4) 시험검사품에 대한 명칭 및 표시
 - 5) 시험접수일자 또는 시험일자
 - 6) 시험성적서 발급일자
 - 7) 시험성적서에 대한 책임 있는 자의 서명 또는 직인
 - 8) 시험기준 및 시험방법. 단, 규격이 없는 경우 이에 대한 설정 사유
 - 9) 시험검사결과
 - 10) 시험검사품 채취 및 방법에 대한 사항(시험을 위한 별도의 전처리가 필요한 경우에 한함)
 - 11) 시험계에 대한 정보, 시험동물의 수량, 성별, 계통, 종, 연령 등(동물, 세포 및 미생물을 이용한 시험인 경우에 한함)
 - 12) 시험결과에 영향을 주는 경우 시험 환경요인
- 추가제출자료
- 1) “시험시설개요”에는 전문기관의 명칭, 주소, 인증현황, 검사가능 분야, 연구인력 구성, 주요설비 목록 등이 기재되어 있어야 한다.
 - 2) “주요설비”에는 시험검사에 사용된 장비명칭, 장비사양, 검교정 기록서 등에 대한 사항이 기재되고 관련 증빙자료를 함께 제출하여야 한다.
 - 3) “연구인력구성”에는 시험검사를 실시한 전문기관 담당부서에 속한 연구인력들에 대한 정보가 기재되어야 한다.
 - 4) “시험자의 연구경력”에는 시험검사를 실시한 실험자가 해당 검사를 하기에 적합한 전공, 경력 등을 가지고 있는지에 대해 기재를 해야하며, 해당 전문기관에서 규정한 요건에 적합한 시험자가 시험하였는지에 대한 자료를 제출하여야 한다.

일회용수동랜식의 허가 및 기술문서 작성을 위한 가이드라인

발행처 식품의약품안전평가원

발행일 2014년 4월

발행인 왕진호

편집위원장 정희교

편집위원 강신정, 윤미옥, 김혁주, 박해대, 성홍모, 이창형, 백성인, 이용경, 황상철, 이응태,
이수경, 김형식, 이희성, 김수진, 유원영
363-954
충북 청원군 오송읍 오송생명5로 303 국도 푸르미르빌딩 5층(식품의약품안
전처 별관)

문의처 식품의약품안전평가원 구강소화기기과

전화: 043-230-0577

팩스: 043-230-0570

363-951 충북 청원군 오송읍 오송생명2로 187

오송보건의료행정타운

식품의약품안전처 식품의약품안전평가원

의료기기심사부 구강소화기기과

TEL : 043)230-0577 FAX : 043)230-0570

<http://www.mfds.go.kr/medicaldevice>

